

实现高效分离、低热损伤与可靠闭合之间的平衡

您可以根据需要启动或结束 thermoSECT 模式，从而显著提高工作速度

TriSect rapide®
切割和闭合真正的一步到位

erbe
power your performance.



reddot winner 2023



爱尔博（上海）医疗器械有限公司 · 上海市延安西路2201号3002室 · 021-62758440 转120 · info.cn@erbegroup.com



JOIN US ON     



四款型号，长度分别为
140毫米，200毫米，
350毫米和450毫米



切割和闭合 真正的一步到位

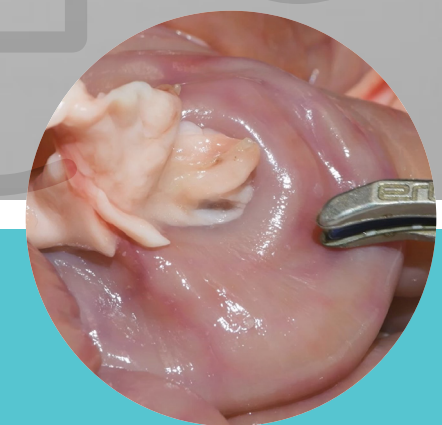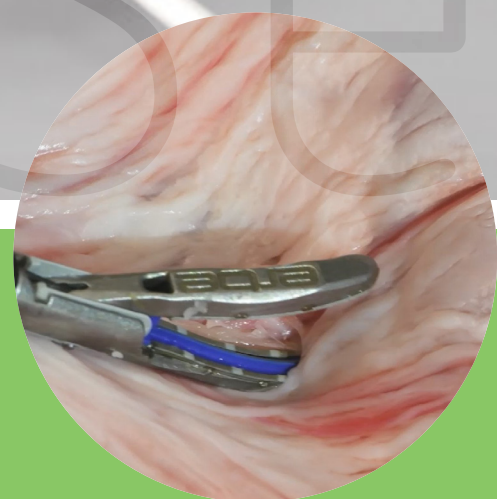


加速切割操作

- 更快速: thermoSECT 模式在提供可靠止血的同时，让您的切割更快速；
- 更高效: 可以抓持、闭合和切割血管和组织束，提升手术效率；
- 更精准: 创新钳口支持精细与钝性两种分离模式，助力术者在敏感区域实现精细解剖，提升操作的安全性与可控性。

*3mm血管1.6秒可完成闭合 / 5mm血管2秒可完成闭合。

可实现多种止血方式

- 可全面应对点状凝血、弥散性出血到组织束处理及可靠血管闭合的各种需求；
- 集成的 softCOAG 双极模式，凭借强大的初始止血功能，可随时实现一步到位的即时止血。

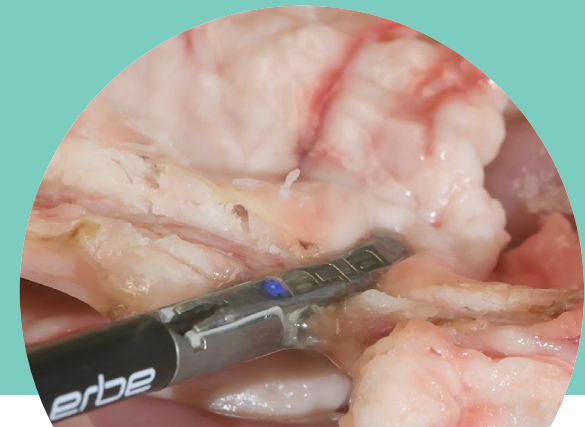

极低热扩散，操作更安全

- 减少对邻近组织的热扩散，避免意外过热损伤*
- 可更接近关键部位进行e操作，侧向热扩散小于 1 毫米*
- 确保了操作的安全性: 单次切割闭合激活后，钳口能快速冷却至 60°C

*钳口背面温度低于 100°C。



即插即用

将 TriSect rapide® 插入到 VIO® 3 工作站，即可启用专为其定制的 thermoSECT 或 softCOAG 模式

您可体验革新性的技术优势